

www.mlbio.cn

mlbio

吡唑醚菌酯快速检测卡使用说明书

Catalog Number: ml108336

使用本产品之前，必须完整阅读本说明书。仅供科研使用，不能于临床诊断或治疗。

产品简介

本产品适用于新鲜蔬菜、水果样品中吡唑醚菌酯残留的定性检测，检测样品种类及检测限详见稀释列表，最低检测限为0.02mg/kg。

产品组成

名称	数量
吡唑醚菌酯快速检测卡（内附金标微孔）	20 份
稀释液	2 瓶
一次性滴管	20 支
50ml 离心管	1 支
1.5ml 离心管	2 支
说明书	1 份

样品处理

- 1、检测前样品需恢复至室温（20-30℃），称取2g剪碎后的样品于50ml刻度离心管中。（备注：样品大小应剪碎成小于1cm见方碎片）
- 2、量取并加入4ml稀释液，手动颠倒混匀（振幅50次/min），充分清洗样品2分钟，静置1分钟，得样品液，检测前用1.5或15mL离心管将样品液与稀释液进行不同比例稀释,得待检液（样品液+稀释液）。

不同样本检出限及稀释比例


下面为各个不同种类待检样品在检测前，需要用户进行稀释操作，稀释列表如下：

样品名称	国标限量	样品液+稀释液
芒果	0.05mg/kg	200uL+200uL
韭葱	0.7mg/kg	20uL+680uL
荔枝	0.01mg/kg	200uL+400uL
菜薹	7mg/kg	5uL+1745uL
杨梅	10mg/kg	5uL+2495uL
叶芥菜	15mg/kg	5uL+3745uL
茺菁叶、芹菜、水芹	30mg/kg	5uL+7495uL
菠菜、油麦菜、萝卜叶	20mg/kg	5uL+4995uL
豌豆、抱子甘蓝、茄子、冬瓜	0.3mg/kg	50uL+700uL
杂粮类（绿豆、豌豆、小扁豆除外）	0.2mg/kg	100uL+900uL
食荚豌豆（包含豇豆）、马铃薯	0.02mg/kg	不用稀释
茼蒿、大白菜、黄花菜干、金橘	5mg/kg	5uL+1245uL
羽衣甘蓝、花椰菜、番茄西葫芦、丝瓜、桃、枣、香蕉	1mg/kg	20uL+980uL
苦瓜、葱、柑、橘、橙、枇杷、杏、樱桃、黑莓	3mg/kg	5uL+745uL

柑橘类水果(柑、橘、橙、柠檬、柚和金橘除外)、黄花菜、草莓、葡萄	2mg/kg	10uL+990uL
结球甘蓝、茄果类蔬菜(番茄、茄子除外)萝卜、胡萝卜、小扁豆、金橘、苹果	0.5mg/kg	20uL+480uL

使用步骤

- 1、测试前先完整阅读说明书，使用前将检测卡和待检样本溶液恢复至室温（20℃-30℃）。
- 2、从铝箔袋中取出检测卡/金标微孔/滴管（共三样耗材），水平放置于观察者正面；
- 3、用铝箔袋中配套滴管吸取上述按不同比例稀释后的待检液120微升(约4滴)于金标微孔中，用配套滴管轻柔吹打30秒，完全溶解金标微孔底部红色物质，水平静置，等待反应2分钟，吸取金标微孔内红色溶液，轻柔吹打10秒后，全部滴加到检测卡加样孔（S）中，加样后开始计时。
- 4、结果应在5-8分钟读取，其它时间结果判读无效。

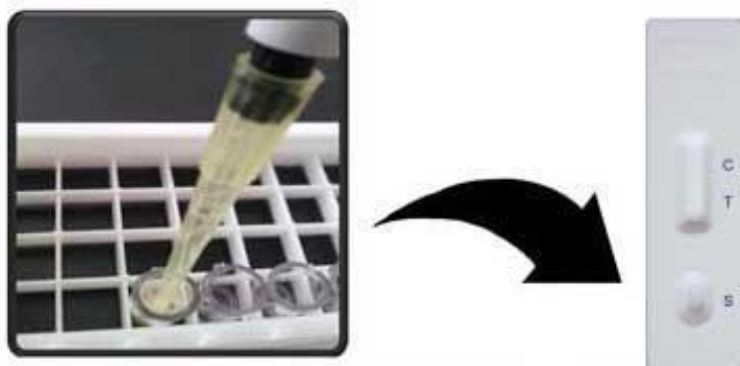


从包装中取出微孔，用移液器吸取待检样本120 μ l至微孔中充分吸打均匀，然后全部滴加至检测卡加样孔内（检测卡平放），静置5-8分钟，根据示意图判读结果

结果判断

阴性（-）：T线（检测线，靠近加样孔一端）显色比C线（对照线）深或一样深，表明样品中吡唑醚菌酯农药残留浓度低于检测限量值或无吡唑醚菌酯农药残留。

阳性（+）：T线显色比C线浅，表明样品中吡唑醚菌酯农药残留浓度高于检测限量值；T线比C线越浅，表明样品中吡唑醚菌酯农药残留浓度越高。

无效：质控区（C）未出现紫红色条带，表明不正确的操作过程或检测卡已变质损坏。在此情况下，应再次仔细阅读说明书，并用新的检测卡重新测试。如果问题仍然存在，应立即停止使用此批号产品，并与当地供应商联系。

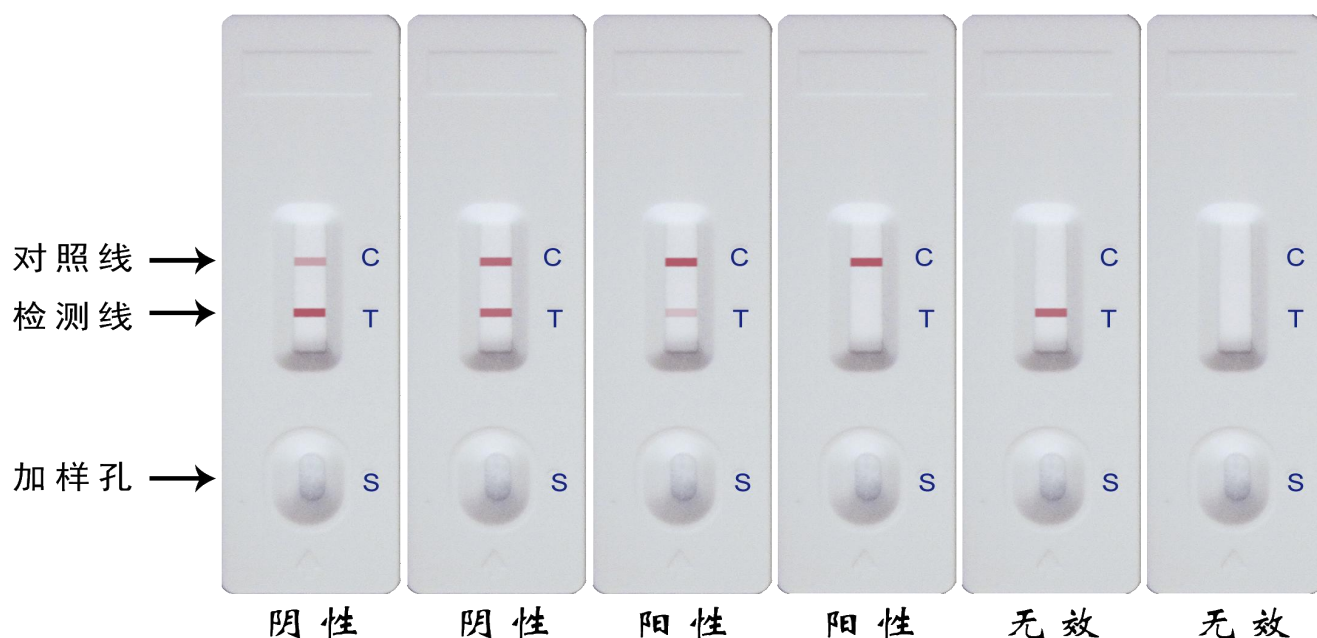

贮存条件及有效期

4°C ~ 30°C避光保存，切勿冷冻，有效期 12 个月。

生产日期及批号

详见包装袋。

注意事项

- 检测卡一次性使用，不要使用过期检测卡；
- 请勿触摸检测卡中央的白色膜面；
- 切勿重复使用配备的滴管，以免交叉污染。

www.mlbio.cn



微信公众号



手机官网

企业：上海酶联生物科技有限公司

办公地址：上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电话：4008-898-798

传真：021-66980655

E-MAIL：2881505699@qq.com