



禽白血病病原检测卡

禽白血病病原参数

原理

禽白血病病原检测卡以双抗体夹心法为基础，采用免疫层析金标记技术，快速检测禽类泄殖腔拭子、胎粪中的禽白血病病毒。

试剂组成

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. 禽白血病抗原快速检测卡 50 套 | 2. 样本稀释液 50 管 |
| 3. 一次性手套 5 双 | 4. 棉签 50 支 |

操作方法

1. 样本一：泄殖腔拭子加入到试纸卡配套的稀释液中，并且在检测之前充分振荡。

样本二：将 1g 肝脾肾等组织样品研磨成匀浆后，按照 1：1 加入蒸馏水,置于 1.5ml 离心管中，10000 转，离心 5 分钟，取上清 100ul 加入样稀中，混匀待测。

2. 充分搅动棉签直至棉签上的样本溶入稀释液，然后丢弃棉签。

3. 振荡、混匀后，垂直样品管，吸取上清液并滴加 4 滴到检测卡中的样品孔中。

4. 8 分钟时判断结果，其他时间判读无效。

结果判定

1. 阳性（图 1）：在观察孔内，若 C 线显色，T 线同时显色，判为阳性。
2. 阴性（图 2）：在观察孔内，若 C 线显色，而 T 线不显色，判为阴性。
3. 无效（图 3）：在观察孔内，若 C 线不显色，则结果无效，建议重新测试。

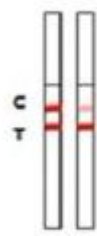


图 1



图 2

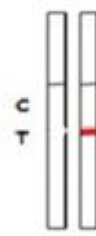


图 3

注意事项

1. 检测线颜色深浅直接与被检测物质含量相关，T 线越深表明含病毒量越高，反之含病毒量越低。T 线清晰的方可视为阳性，不出现 T 线或 T 线模糊视为阴性，建议两周后对 T 线模糊者进行重测。
2. 本产品是定性产品，结果仅供参考。
3. 测试样品来自动物，可能有潜在感染性，样品和使用过的试剂应被看作微生物危险品处理。
4. 本品为一次性产品，请勿二次使用；请勿使用非本品随附的稀释液。
5. 打开包装后，请于 1 小时内使用。在试纸条上做好相关标记。现用现开，开封后不宜久置。

www.mlbio.cn

储存及有效期

保存于干燥阴凉处（4~25℃），有效期为 18 个月，生产日期见外包装盒。



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址：上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话： 4008-898-798

传 真： 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com