



卡那霉素免疫胶体金快速检测试剂板

卡那霉素免疫胶体金参数

产品简介

本产品用于快速检测各种奶样（酸奶不适合用本品检测）中的卡那霉素药物残留，整个检测过程只需要 20 分钟左右，检出限为 100 $\mu\text{g/kg}$ (ppb)，适用于各类企业及检测机构。

产品组成

卡那霉素免疫胶体金快速检测试剂板

说明书（1 份/盒）

需使用但未提供的试剂、器具

加热器、微量移液器

操作步骤


1. 撕开卡那霉素免疫胶体金快速检测试剂板包装，取试剂板。

（试验环境的温度必须 20 度以上.冷冻过的原奶,明显出现颗粒的,容易导致跑板不完全，此时必须使用加热器加热或者离心取中间层样本进行检测。）

2. 用移液枪取 200 μL (或用滴管取 6 滴) 生乳滴加到试剂板的加样孔中。

3. 5~8 分钟后判读结果。

结果判断

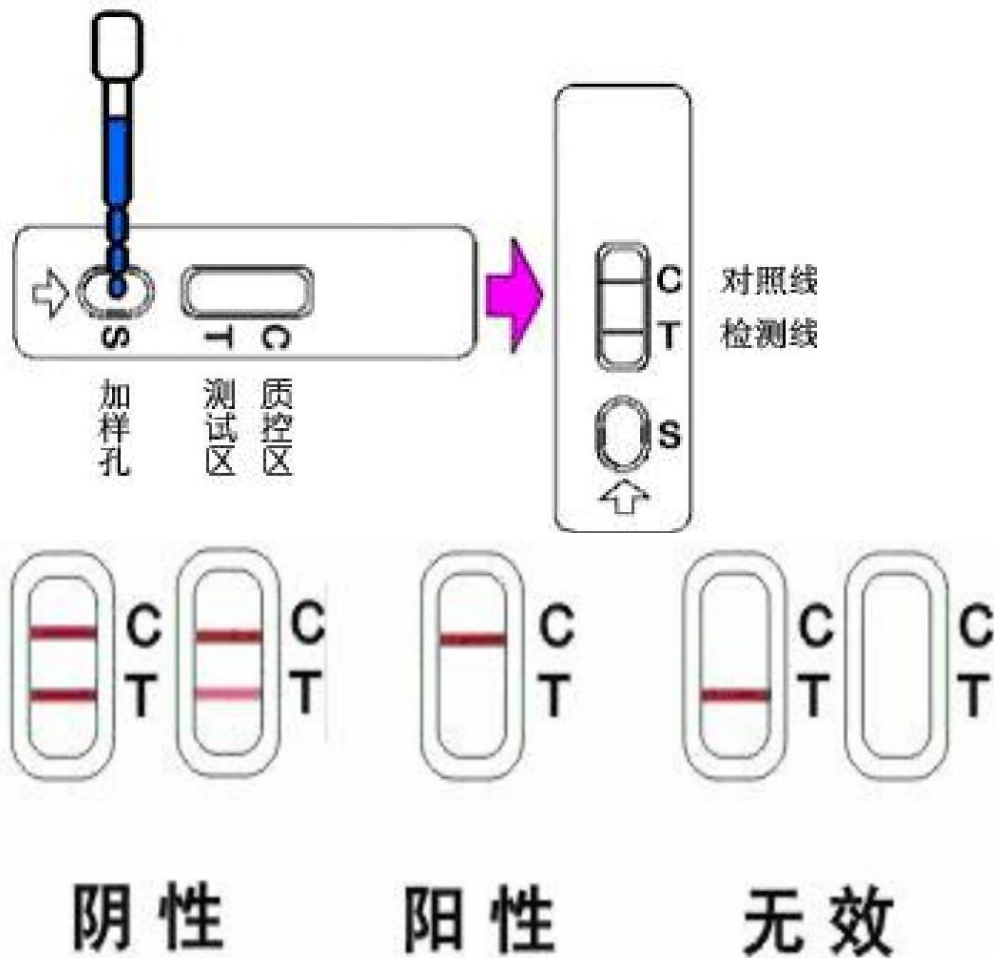

阴性(-)： T 线（检测线，靠近加样孔一端）显色，表明样品中卡那霉素浓度低于检测限或无卡那霉素残留。

阳性 (+)： T 线无显色，表明样品中卡那霉素浓度高于检测限；

无效： 未出现 C 线，可能操作不当或试剂板已失效。应再次阅读说明书，并用新的试剂板重新测试。

注意事项

1. 试剂条一次性使用；
2. 不要使用过期试剂条，废弃物应妥善处理；

3. 请勿触摸试剂条中央的白色膜面；
4. 切勿重复使用配备的滴管，以免交叉污染；
5. 切勿食用配备的试剂；
6. 若需直接检测标准品，我方可提供配置液；
7. 试验遇到的任何问题，请与供应商联系。

特异性

本产品与氯霉素、链霉素、磺胺类药物无交叉反应

贮存条件

4℃~30℃避光保存，切勿冷冻

有效期 12 个月。

生产日期 详见包装袋。



微信公众号



手机官网

www.mlbio.cn

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com